



EVER Pharma D-mine® Pen قلم

قلم تزریق برای آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر

دستورالعمل های استفاده

با کارتریج های 3 میلی لیتر Dacepton®

محلول تزریقی آپومورفین هیدروکلرید همی هیدرات

استفاده زیرجلدی



فهرست مطالب

4	مقدمه	27
6	معرفی اجزای قلم D-mine® Pen	28
7	آماده سازی قلم / تعویض کارتریج	29
10	وصل کردن سوزن قلم	29
12	هواگیری / کنترل عملکرد	31
14	تنظیم دوز	
15	تزریق	
16	برداشتن سوزن قلم	
18	وصل کردن درپوش قلم	
19	اطلاعات تکمیلی	
22	نگهداری و مراقبت	
24	هشدارها و اطلاعات مهم درباره مخاطرات	

عمر مفید تأییدشده
ضمانت
دفع
برچسب ها و نمادها
سازنده / توزیع کننده

ران انجام دهید. در هر بار استفاده از قلم **D-mine® Pen** موضع تزریق را عوض کنید. از تزریق در نقاطی از پوست که دردناک، قرمز، عفونی یا صدمه دیده است خودداری کنید. هرگز نباید مستقیماً در یک رگ (وریدی) یا عضله (عضلانی) تزریق کنید.

کارتریج ها و سوزن قلم های سازگار

- کارتریج های 3 میلی لیتری **Dacepton®** (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) ساخت EVER Neuro Pharma GmbH دارای گواهی -ISO EN 11608 1
- سوزن های **BD Micro-Fine Ultra™** گیج 29 تا 31 (قطر 0.25 تا 0.33 میلی متر) و طول 5 تا 12.7 میلی لیتر.
- کارتریج ها و سوزن قلم های سایر سازندگان بر طبق مشخصات سازگاری اعلام شده آنها قابل استفاده می باشند.

قلم **D-mine® Pen** می تواند دوزهای 0.5 تا 6.0 میلی گرم را با افزایش های 0.5 میلی گرمی (متناظر با 50 میکرولیتر در هر پله) تزریق کند. اگر درباره قلم **D-mine® Pen** سؤالی دارید، تلفن راهنمای خدمات محلی ما همیشه آماده پاسخگویی خواهد بود (صفحه 23 را ملاحظه کنید).


این دفترچه راهنما حاوی دستورالعمل های نحوه استفاده، نگهداری و تمیز کردن قلم **EVER Pharma D-mine® Pen** می باشد. محتویات جعبه:

1 عدد قلم **EVER Pharma D-mine® Pen**، 1 عدد کیف قلم، 1 عدد راهنمای استفاده. تذکر: جعبه حاوی سوزن قلم یا کارتریج های 3 میلی لیتری نیست. حتی اگر قبلاً از قلم **D-mine® Pen** یا سایر سیستم های قلم تزریق استفاده کرده اید باید حتماً دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما را با دقت تمام مطالعه کنید. این قلم یک ابزار تزریق چند بار مصرف و بدون نیاز به نگهداری است که از یک سیستم فنر خودکار برای تزریق دارو بهره می گیرد. قلم **D-mine® Pen** با مقررات دستورالعمل اتحادیه اروپا (EU) درباره محصولات پزشکی هماهنگی دارد و انطباق آن با **93/42/EEC** و استانداردهای همگون به تأیید رسیده و علامت **CE** روی آن درج شده است (صفحه 30 را ملاحظه کنید).

موارد استفاده: قلم تزریق برای محلول تزریقی کارتریج های 3 میلی لیتری **Dacepton®** (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) ساخت EVER Neuro Pharma GmbH. قلم **D-mine® Pen** برای استفاده توسط بیماران بزرگسال که دارویشان را شخصاً تزریق می کنند، کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی و نیز افراد دیگر مانند بستگان و مراقبت کنندگان بزرگسال طراحی شده است. لطفاً به بروشور موجود در بسته بندی محصول دارویی رجوع کنید. دست های خود را قبل از استفاده از قلم **D-mine® Pen** بشویید. شما به تعدادی پد الکلی و یک سوزن با درپوش محافظ نیاز دارید. موضعی از پوست که قرار است دارو را در آنجا تزریق کنید و ناحیه اطراف آن را با یک پد الکلی تمیز کنید. همان طور که پزشک یا پرستار به شما نشان داده اند، تزریق را به صورت زیرجلدی (زیر پوست) در یک موضع تزریق واقع در جلوی شکم یا قسمت های بیرونی

معرفی اجزای قلم D-mine® PEN

تذکر: جعبه حاوی سوزن قلم یا کارتریج های 3 میلی لیتری نیست.

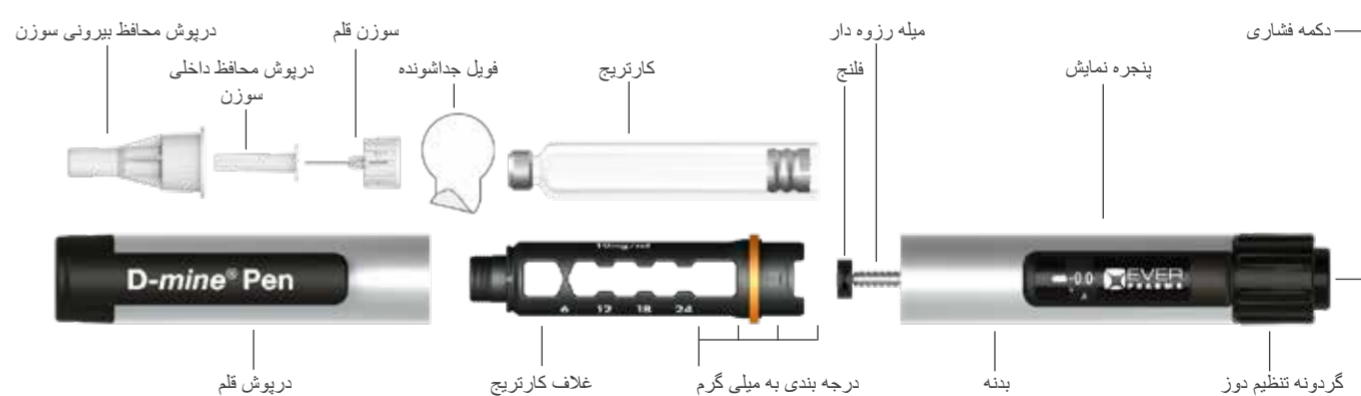

6

آماده سازی قلم / تعویض کارتریج

1 درپوش قلم را باز کنید.




2

با گرداندن غلاف کارتریج در جهت حرکت عقربه های ساعت، آن را بردارید. یک صدای کلیک خواهید شنید. در صورت نیاز، کارتریج خالی را بردارید.




7

3 یک کارتریج جدید در داخل غلاف کارتریج بگذارید.

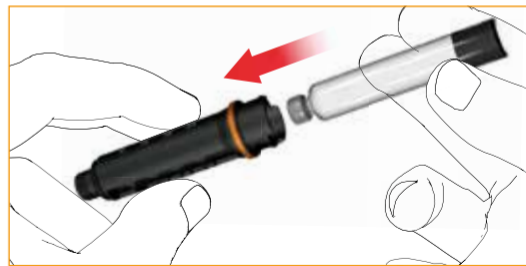

4 میله رزوه دار را کامل به عقب فشار دهید. بهترین روش انجام این کار استفاده از نوک انگشت است (یا می توانید از کارتریج جدید و غلاف کارتریج هم استفاده کنید).

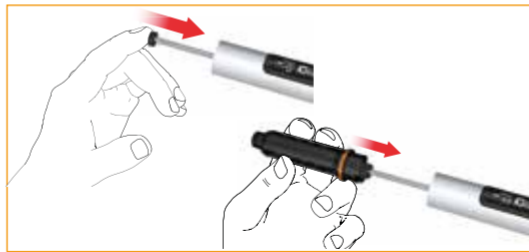


5 غلاف کارتریج را در داخل بدنه بگذارید و در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود. یک صدای کلیک خواهید شنید.



وصل کردن سوزن قلم

دستورالعمل های استفاده از سوزن قلم را دنبال کنید.

1 فویل جداشونده را بردارید.

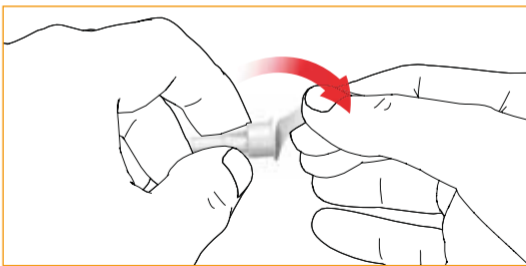

2 سوزن قلم را با کلیک کردن / چرخاندن روی غلاف کارتریج قرار دهید. مطمئن شوید که سوزن قلم درست وصل شده باشد.



3 درپوش محافظ بیرونی سوزن را بردارید. درپوش محافظ بیرونی سوزن را نگه دارید تا پس از استفاده، برای برداشتن و دور انداختن بی خطر سوزن قلم از آن استفاده کنید.



4 درپوش محافظ داخلی سوزن را بردارید و دور بیندازید.



هواگیری / کنترل عملکرد

با کنترل عملکرد، اطمینان حاصل می‌شود که هیچ هوایی در کارتریج باقی نماند و سوزن دچار گرفتگی نباشد. توصیه می‌شود قبل از هر بار استفاده و تعویض کارتریج و وصل کردن سوزن قلم، هواگیری کنید.

1 با چرخاندن گردونه تنظیم دوز، میزان دوز آزمایشی را تنظیم کنید. برای کنترل دوز تنظیم شده از بالا به صورت عمودی و بدون زاویه به نمایشگر نگاه کنید تا علامت "H" به وضوح دیده شود.



2 برای کنترل عملکرد، قلم D-mine® Pen را به سمت بالا بگیرید و با ملایمت به غلاف کارتریج ضربه بزنید تا هوا بتواند بالا بیاید.



3 دکمه فشاری را فشار دهید.



4 چند قطره دارو از نوک سوزن قلم بیرون خواهد آمد.

اگر هیچ قطره‌ای مشاهده نشد باید مراحل 1 تا 4 را تکرار کنید. اگر بعد از چند بار کنترل عملکرد هیچ قطره‌ای مشاهده نشد، سوزن قلم را عوض کرده کنترل عملکرد را تکرار کنید (مراحل 1 تا 4). اگر هنوز هیچ قطره‌ای مشاهده نمی‌شود یا در صورت وقوع هر مسئله‌ای با شماره تلفن راهنمای خدمات که در صفحه 23 ذکر شده تماس بگیرید.





گردونه را روی دوز مورد نیاز بچرخانید

با چرخاندن گردونه تنظیم دوز در جهت حرکت عقربه های ساعت، میزان دوز مورد نیاز را تنظیم کنید. برای تصحیح دوز، گردونه را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. برای کنترل دوز تنظیم شده از بالا به صورت عمودی و بدون زاویه به نمایشگر نگاه کنید تا عددها به وضوح دیده شوند.

تذکر: هر علامت "-" روی گردونه دوز معرف 0.1 میلی گرم دارو است برای هر پله ای که می چرخانید، یک صدای کلیک خواهید شنید. برای اندازه گیری دوز صحیح به شمارش این کلیک ها اکتفا نکنید.

توقف ایمنی

دوز داروی قابل تنظیم روی قلم **D-mine® Pen** به مقدار باقیمانده در کارتریج محدود می باشد. اگر مقدار داروی باقیمانده در کارتریج دیگر برای دوز دلخواه کافی نباشد، گردونه تنظیم دوز را نمی توان بیشتر از آن در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخاند.



تذکر: با رها کردن دکمه فشاری می توانید تزریق را متوقف کنید. مقدار باقیمانده داروی تحویل نشده در نمایشگر دیده می شود و با فشار دادن دوباره دکمه فشاری قابل تزریق خواهد بود.

1

لطفاً به بروشور محصول دارویی رجوع کنید و تزریق را طبق شیوه توصیه شده پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی انجام دهید. برای تزریق دکمه فشاری را کامل فشار دهید. در حین خروج دارو دکمه فشاری را در حالت فشرده نگه دارید.

2


بعد از اینکه دارو به طور کامل خارج شد، 6 ثانیه صبر کنید و سپس سوزن قلم را به آهستگی بیرون بکشید. در طول آن 6 ثانیه می توانید به فشار دادن دکمه فشاری ادامه دهید یا آن را رها کنید.

3

برای مطمئن شدن از تحویل دوز کامل، نمایشگر را ملاحظه کنید تا در موقعیت "0.0" باشد.

برداشتن سوزن قلم بعد از هر تزریق

1 درپوش محافظ بیرونی سوزن را با دقت به سوزن قلم وصل کنید.

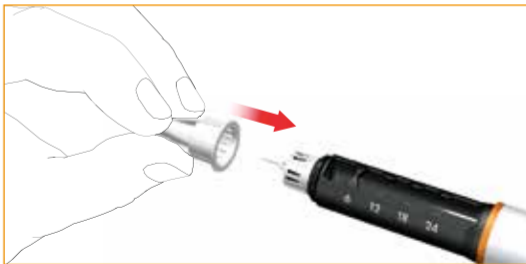

2 با چرخاندن غلاف محافظ بیرونی در جهت حرکت عقربه های ساعت، سوزن قلم را باز کنید و به شیوه ای صحیح و مطابق با توصیه پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی خود، آن را دور بیندازید. کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی باید دستورالعمل های خاص ارائه شده برای کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی اعم از دستورالعمل نحوه بستن مجدد درپوش و شیوه دور انداختن و تمام موارد مطرح شده دیگر را رعایت نمایند. لطفاً برای آگاهی از دستورالعمل های خاص، با یک پزشک مشورت کنید.



اقدام اختیاری:


غلاف محافظ بیرونی سوزن قلم را در فرورفتگی مربوطه در سمت چپ کیف حمل قرار دهید. دهانه غلاف محافظ سوزن باید به سمت بالا قرار گیرد. سوزن (متصل به قلم) را با دقت در دهانه غلاف محافظ قرار دهید. بدون قرار دادن بر روی لبه های غلاف خارجی محافظ سوزن، محکم به پایین فشار دهید و در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا سوزن قلم باز شود.

تذکر: فرورفتگی بزرگتر واقع در سمت راست کیف حمل برای سوزن های استفاده شده توسط کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی مناسب است.



وصل کردن درپوش قلم

درپوش قلم را بعد از هر بار استفاده محکم وصل کنید.

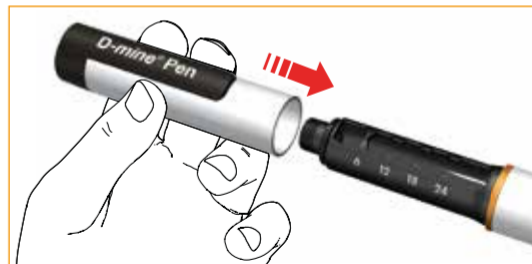

اطلاعات تکمیلی

نشانگرهای صوتی و لمسی

قلم D-mine® Pen دارای نشانگرهای صوتی و یا لمسی زیر می باشد:

برداشتن/قفل کردن غلاف کارتریج

هنگام برداشتن یا قفل کردن غلاف کارتریج، یک سیگنال صوتی شنیده می‌شود و مقداری مقاومت محسوس نیز حس می‌شود.

تنظیم دوز

قلم D-mine® Pen در حین تنظیم دوز و تصحیح دوز، برای هر پله تنظیم یک سیگنال صوتی پخش می‌کند و مقداری مقاومت محسوس نیز ارائه می‌دهد.

تزریق

خروج دارو از قلم D-mine® Pen محسوس خواهد بود. در حین خروج دارو یک سیگنال صوتی پخش می‌شود و بعد از خروج کامل دارو بر اساس دوز تنظیم شده متوقف خواهد شد.

دوز قابل تنظیم روی قلم *D-mine*[®] Pen به مقدار باقیمانده در کارتریج محدود می باشد. اگر مقدار داروی باقیمانده در کارتریج برای دوز دلخواه کافی نباشد، گردونه تنظیم دوز را نمی توان بیشتر از آن در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخاند.

- سعی نکنید با زور گردونه تنظیم دوز را بیش از حد بچرخانید.
- به دوز باقیمانده قابل خروج و تزریق توجه داشته باشید.
- کارتریج و سوزن قلم را عوض کنید و کنترل عملکرد را انجام دهید (فصل "هواگیری / کنترل عملکرد" مراحل 1 تا 4).
- دوز باقیمانده را تنظیم و تزریق کنید.

اگر قلم *D-mine*[®] Pen آسیب دیده و یا در مورد عملکرد صحیح آن تردیدی دارید از قلم استفاده نکنید.

بعد از اینکه کارتریج را در قلم *D-mine*[®] Pen قرار دادید می توانید آن را داخل قلم باقی بگذارید. لطفاً دستورالعمل های نگهداری ارائه شده توسط سازنده داروی خود، EVER Neuro Pharma را رعایت کنید.

هنگام تعویض کارتریج باید اطمینان حاصل کنید که یک کارتریج جدید در داخل غلاف کارتریج قرار می دهید. نباید کارتریج های استفاده شده را داخل غلاف کارتریج بگذارید.

در هر نوبت تزریق باید از یک سوزن جدید استفاده کنید چون سوزن ها

- استریل هستند و برای جلوگیری از عفونت، فقط باید یک بار از آنها استفاده شود
- بعد از استفاده تغییر شکل می یابند و استفاده از آنها دردناک تر می شود

در خصوص کار با موادی که احتمالاً عفونت زا هستند، باید قوانین و مقررات محلی کشور خود را رعایت نمایید.

نگهداری و مراقبت

لطفاً برای کار با سوزن ها و کارتريج ها و نگهداری از آنها، طبق دستورالعمل های مربوطه عمل کنید.

بعد از هر بار استفاده، درپوش قلم را محکم ببندید. همیشه باید قلم *D-mine® Pen* را بدون اینکه سوزن قلم به آن وصل باشد در کیف حمل نگهداری کنید.

قلم *D-mine® Pen* خود را در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی‌گراد استفاده و نگهداری کنید. عدم رعایت این نکته موجب کاهش عمر مفید قلم *D-mine® Pen* خواهد شد.

اگرچه قلم *D-mine® Pen* شما از ساختار محکمی برخوردار است، امکان آسیب دیدن آن وجود دارد. لطفاً هنگام کار با قلم *D-mine® Pen* خود، جانب احتیاط و دقت را رعایت نمایید و از آن در برابر آب، گرد و خاک و رطوبت محافظت کنید.

یک دستمال مرطوب برای تمیز کردن قلم *D-mine® Pen* کفایت می کند. لطفاً از الکل، سایر حلال ها یا مواد شوینده استفاده نکنید. هرگز قلم *D-mine® Pen* خود را در آب فرو نبرید چون این کار می تواند به آن آسیب برساند.

لطفاً کارت ثبت نام خود را به محض دریافت تکمیل کرده و به آموزشگر حامی خود تحویل دهید.

اگر در خصوص قلم *D-mine® Pen* خود سؤال یا مسئله ای دارید، بخش خدمات مشتریان همواره از طریق شماره تلفن رایگان در دسترس شما خواهد بود.

لطفاً قلم *D-mine® Pen* معیوب را را به آموزشگر حامی خود تحویل دهید و یا به این نشانی ارسال کنید:

شماره تماس 24 ساعته ی حامی: 09913535145

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 39، شرکت آماژن دارو، کد پستی: 1516673115

هشدارها و اطلاعات مهم درباره مخاطرات

در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها، احتمال اشتباه بودن داروی مورد استفاده، اشتباه بودن دوز، انتقال بیماری یا عفونت وجود خواهد داشت. اگر درباره سلامتی خود دغدغه و نگرانی ای دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.



این دستورالعمل های استفاده را پیش از استفاده از قلم *D-mine*[®] Pen مطالعه نمایید. تنها پس از مشورت با پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی خود، دستورالعمل های مربوط به استفاده از قلم *D-mine*[®] Pen، سوزن قلم و کارتریج را اجرا نموده از قلم *D-mine*[®] Pen استفاده کنید.



اطمینان حاصل کنید که استفاده کننده اصلی به روش صحیح با این محصول کار می کند

- قلم *D-mine*[®] Pen نباید توسط بیماران نابینا یا دارای ضعف بینایی بدون کمک افراد آموزش دیده استفاده شود. در صورت وجود ضعف شنوایی و لامسه، با پزشک خود مشورت کنید.
- قلم *D-mine*[®] Pen، سوزن های قلم و نیز کارتریج ها را دور از دسترس کودکان و افرادی نگهداری کنید که با شیوه صحیح استفاده از آنها آشنایی ندارند.



اطمینان حاصل کنید که از محصول به شکل صحیح استفاده می شود

- قلم *D-mine*[®] Pen را تنها به عنوان بخشی از درمان تجویز شده توسط پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی استفاده نمایید.
- از کارتریج ها، مقادیر دوز و سوزن های قلم توصیه و تجویز شده توسط پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی استفاده کنید. هر گونه تغییر باید با نظارت یک پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی انجام پذیرد.
- پیش از هر تزریق، کنترل کنید که داروی صحیح در قلم *D-mine*[®] Pen باشد. کنترل کنید که کارتریج آسیب ندیده و دارو با مشخصات ذکر شده در بروشور محصول مطابقت داشته باشد.
- برای جلوگیری از خطر انتقال بیماری، سوزن های قلم و کارتریج باید فقط توسط یک نفر استفاده شود.
- قلم *D-mine*[®] Pen را به واسطه قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید یا سرما (مانند داخل فریزر) در معرض دماهای شدید قرار ندهید.
- قلم *D-mine*[®] Pen را در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی‌گراد استفاده و نگهداری کنید.
- قلم *D-mine*[®] Pen را روی زمین نیندازید و از برخورد آن با سطوح سخت خودداری کنید. از فرو بردن قلم *D-mine*[®] Pen در آب خودداری کنید. به طور کلی با احتیاط با آن کار کنید. اگر در مورد عملکرد قلم *D-mine*[®] Pen تردیدی دارید، هرگز از آن استفاده نکنید.
- هرگز سعی نکنید یک قلم *D-mine*[®] Pen آسیب دیده را شخصاً تعمیر کنید. در صورت صدمه دیدن یا معیوب بودن قلم *D-mine*[®] Pen با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید (صفحه 23 را ملاحظه کنید).



اطمینان حاصل کنید که دارو به طور صحیح تزریق شود

- پیش از هر تزریق باید یک کنترل عملکرد انجام دهید (بخش "هواگیری / کنترل عملکرد" مرحله 1 تا 4) تا از اشتباه شدن دوز بر اثر وجود هوا در داخل کارتریج یا گرفتگی سوزن قلم جلوگیری به عمل آید. اگر هواگیری قابل انجام نبود، از یک سوزن قلم نو استفاده کنید.
- بعد از هر تزریق باید طبق دستورالعمل های پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی خود کنترل کنید که قطرات دارو از سوزن قلم یا قلم *D-mine*[®] Pen یا از موضع تزریق بیرون می آید یا خیر. اگر دارو از سوزن قلم یا قلم *D-mine*[®] Pen یا موضع تزریق بیرون می آید، باید دستورالعمل های پزشک و یا کارشناس مراقبت های بهداشتی و درمانی خود را در خصوص اقدام صحیح در صورت احتمال کم بودن دوز دنبال کنید. اگر درباره سلامتی خود دغدغه و نگرانی ای دارید به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت وقفه در تزریق به دلیل رها کردن دکمه فشاری، مقدار داروی تزریق نشده را در نمایشگر کنترل کنید. مقدار باقیمانده دارو با فشار دادن مجدد دکمه فشاری قابل تزریق خواهد بود.
- در صورت تزریق اتفاقی دارو، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

عمر مفید تأییدشده

استمرار و حفظ دقت دوز و الزامات منطبق با استاندارد EN ISO 11608-1 برای تعداد دفعات تزریق و تعویض کارتریج برابر تعریف ارائه شده درجدول زیر از تاریخ نخستین استفاده تأیید می گردند:

دوز روزانه [میلی گرم]	دفعات تزریق در روز [تعداد]	دوز در هر تزریق [میلی گرم]	عمر مفید [ماه]
3	3	1	36
6	3	2	36
9	3	3	36
12	3	4	36
15	3	5	36
16	4	4	30
20	4	5	30
24	4	6	30
25	5	5	24
30	5	6	24

دوز روزانه [میلی گرم]	دفعات تزریق در روز [تعداد]	دوز در هر تزریق [میلی گرم]	عمر مفید [ماه]
30	6	5	18
36	6	6	18
35	7	5	12
42	7	6	12
40	8	5	12
48	8	6	12
45	9	5	12
54	9	6	12
50	10	5	12
60	10	6	12

EVER Neuro Pharma عملکرد صحیح قلم را در صورت استفاده بر طبق دستورالعمل های مصرف، برای مدت دو سال تضمین می نماید. ضمانت محدود به تعویض قلم می باشد.

قلم D-mine® Pen برای استفاده با کارتریج های 3 میلی لیتری Dacepton® (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) EVER Neuro Pharma GmbH بر طبق 1-EN SO 11608 طراحی و ساخته شده و فقط با این کارتریج ها قابل استفاده می باشد. EVER Neuro Pharma GmbH هیچ مسئولیتی در قبال آسیب ها و صدمات ناشی از استفاده از کارتریج های ناسازگار نمی پذیرد. این ضمانت شامل آسیب ها و صدمات ناشی از استفاده، کار یا تمیز کردن نادرست یا سهل انگارانه نیست و در مواردی که خلاف دستورالعمل از محصول استفاده گردیده و در صورتی که قلم همراه با تجهیزات پزشکی یا متعلقات و مواد مصرفی غیر از آنچه توسط EVER Neuro Pharma GmbH توصیه شده است استفاده گردد، فاقد اعتبار خواهد بود.

قلم D-mine® Pen شما بر طبق دستورالعمل های مراجع محلی یا همراه با پسماند خانگی قابل دفع است قلم D-mine® Pen حاوی مواد مضر برای محیط زیست نمی باشد.

برچسب ها و نمادها

قلم D-mine® Pen با مقررات دستورالعمل اتحادیه اروپا (EU) درباره محصولات پزشکی (93/42/EEC) هماهنگی دارد.

مشخصات فنی		
طول:	170 میلی متر	درجه بندی:
قطر:	17 میلی متر	حجم تزریق با هر کلیک:
وزن:	40 گرم	حداکثر دوز در هر تزریق:
حجم پرشونده:	3 میلی لیتر	شرایط نگهداری:
نمایشگر:	میلی گرم	شرایط کارکرد:
		0.5 تا 35 درجه سانتی‌گراد
		0.5 تا 35 درجه سانتی‌گراد



نام و آدرس سازنده



در معرض حرارت و نور خورشید
قرار ندهید



هشدار: اطلاعات مهم ایمنی در
دستورالعمل های استفاده عنوان شده است



تاریخ ساخت



در معرض رطوبت قرار ندهید



سری ساخت



شماره کالا



دستورالعمل های استفاده را مطالعه کنید



علامت مربوط به تطابق با دستورالعمل اتحادیه اروپا
درباره تجهیزات پزشکی با ذکر شماره سازمان مورد
ابلاغ

سازنده / توزیع کننده

سازنده:



EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach, اتریش



توزیع کننده:

نمایندگی در ایران:

شرکت آلمان دارو

تهران- میدان آرژانتین - خیابان الوند- پلاک 39

لوگوی EVER Pharma، Dacepton و D-mine از علائم تجاری متعلق به EVER Neuro Pharma GmbH می باشد.
بازنگری: 01/2019

